



CARY Base

Handleiding

Art. nr: 508900

Softwareversie 1.3.0 of hoger

Inhoudsopgave

Inleiding	4
Over CARY Base	4
Beoogd doeleind	4
Over dit document	4
Overzicht van CARY Base	5
Ga aan de slag met CARY Base	6
CARY Base in huis plaatsen	6
Start CARY Base	6
CARY Base instellen	6
Gebruik CARY Base	7
Hoofdweergave gebruiken	7
Herinneringen gebruiken	7
Het volume van de spraakondersteuning wijzigen	7
Dagintervallen	8
Personaliseer CARY Base	8
Naar het aan/uit-menu gaan	8
De instellingen wijzigen	9
Scherm informatie kiezen	10
De kalender beheren	12
Externe apparatuur aansluiten	15
Onderhoud	16
Controleren op nieuwe programmaversies	16
Herstel fabrieksinstellingen van CARY Base	16
Reinig CARY Base	16
Problemen oplossen	17
Opslag en verwijderen	18
Productspecificaties	19
Belangrijke informatie	20
Contactgegevens	23

Inleiding

Over CARY Base

CARY Base is een kalenderklok voor mensen die extra hulp nodig hebben om de dag bij te houden en dingen te onthouden. Het scherm toont de datum, dag van de week, tijd en of het ochtend, middag, avond of nacht is. U kunt de informatie laten voorlezen door op het scherm te tikken of door een bedieningsschakelaar te gebruiken.

Het is mogelijk om de dagelijkse activiteiten van de gebruiker op het beeldscherm weer te geven en om persoonlijke herinneringen te geven op de gewenste tijden. De kalender wordt rechtstreeks op het apparaat of op afstand beheerd via de webservice myAbilia.

Om aan de behoeften van de gebruiker te voldoen, kan de hoeveelheid informatie op het beeldscherm worden verminderd en kan de taal worden ingesteld op een van de vele beschikbare talen.

Beoogd doeleind

CARY Base is een kalenderklok die bedoeld is om ondersteuning te bieden aan personen met verstoorde tijdsoriëntatie en geheugen.


CARY Base is bedoeld voor gebruik binnenshuis in een woonomgeving.

Over dit document

 Lees de belangrijke informatie op pagina 20 voordat u het product gebruikt.

In dit document leert u hoe u het product kunt opstarten en personaliseren CARY Base voor de persoon die het product gaat gebruiken.

Overzicht van CARY Base

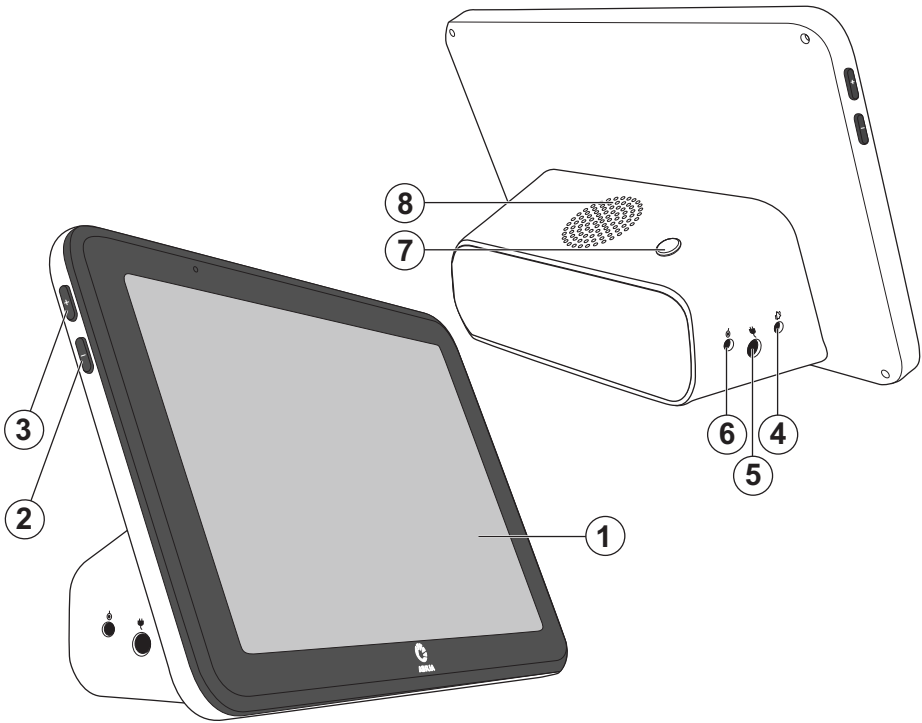

1. Beeldscherm met touchscreen
2. Volume -
3. Volume +
4. Relaisuitvoer voor het doorsturen van het herinneringssignaal
5. Voedingsaansluiting
6. Aansluiting voor schakelaarsingang (accessoire)
7. Aan/uit-knop
8. Luidspreker

Meegeleverde onderdelen

- CARY Base
- Stroomadapter

Meegeleverde documenten


- Handleiding (dit document)

Ga aan de slag met CARY Base

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik CARY Base niet als het product beschadigd is.



CARY Base in huis plaatsen

Bepaal waar u CARY Base in huis wilt plaatsen. Plaats hem op een goed zichtbare plek, zoals op het aanrecht. Zorg ervoor dat er geen weerkaatsingen zijn van licht of ramen op het beeldscherm.

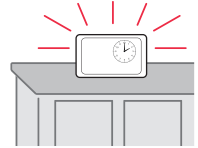

Start CARY Base

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik alleen de voedingsadapter die bij CARY Base is geleverd.

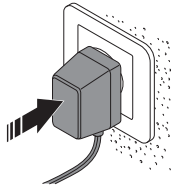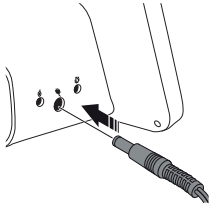

1. Sluit het contact aan op de voedingsaansluiting, gemarkeerd met .
2. Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact.

CARY Base instellen

Wanneer u CARY Base voor het eerst opstart, wordt u begeleid om uw voorkeurstaal, datum en tijd in te stellen. Als u wilt, kunt u ook de informatie wijzigen die op het scherm wordt weergegeven.

Zie *De instellingen wijzigen* op pagina 9 voor meer informatie.

Gebruik CARY Base

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik CARY Base niet als het product beschadigd is.

Hoofdweergave gebruiken

- Bekijk de datum en tijd van vandaag op het beeldscherm.
- Bekijk de activiteiten van vandaag. Dit is alleen beschikbaar als het dagplan is ingeschakeld in de instellingen.
- Tik op het beeldscherm om de informatie te horen.

Dit is alleen beschikbaar als de taal die u hebt gekozen, spraakondersteuning heeft en spraakondersteuning is ingeschakeld in de instellingen.



Herinneringen gebruiken


Er verschijnt een herinnering wanneer de activiteit begint. Als u de herinnering niet zelf sluit, sluit deze automatisch na 30 minuten.

- Tik ergens op het beeldscherm om het herinneringssignaal te stoppen.
- Tik op Speel af om het herinneringsbericht te herhalen.
- Tik op OK om de herinnering te sluiten.



Het volume van de spraakondersteuning wijzigen

Wijzig het volume van de spraakondersteuning met de knoppen + en - aan de zijkant van CARY Base.

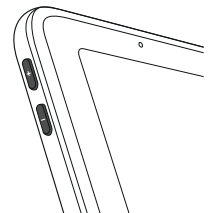

Dagintervallen

CARY Base geeft het deel van de dag weer volgens dagintervallen. De dagintervallen kunnen worden gewijzigd; zie *De instellingen wijzigen* op pagina 9.

De dagintervallen zijn als volgt voorgeprogrammeerd:

- Vroege ochtend: 06:00–10:00
- Ochtend: 10:00–12:00
- Middag: 12:00–17:00
- Avond: 17:00–22:00
- Nacht: 22:00–06:00



Nachts wordt de helderheid van het scherm automatisch verlaagd. Als de donkere achtergrond is ingeschakeld, is de kleur van de achtergrond tijdens de nacht donker.

TIP: U kunt het beeldscherm uitschakelen door op de aan/uit-knop te drukken. Het beeldscherm licht op voor herinneringen.

Personaliseer CARY Base


Naar het aan/uit-menu gaan


Het aan/uit-menu geeft u toegang tot de instellingen en de kalender. U kunt CARY Base ook uitschakelen via dit menu.

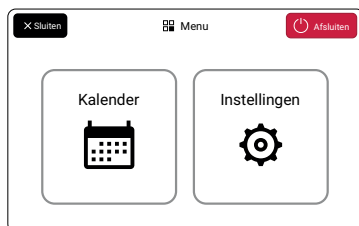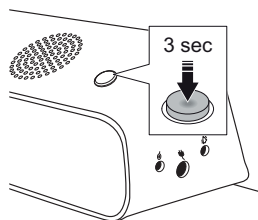


1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt.
2. Het aan/uit-menu wordt geopend.


De instellingen wijzigen


Om de instellingen van CARY Base te wijzigen, gaat u naar het aan/uit-menu en tikt u op .

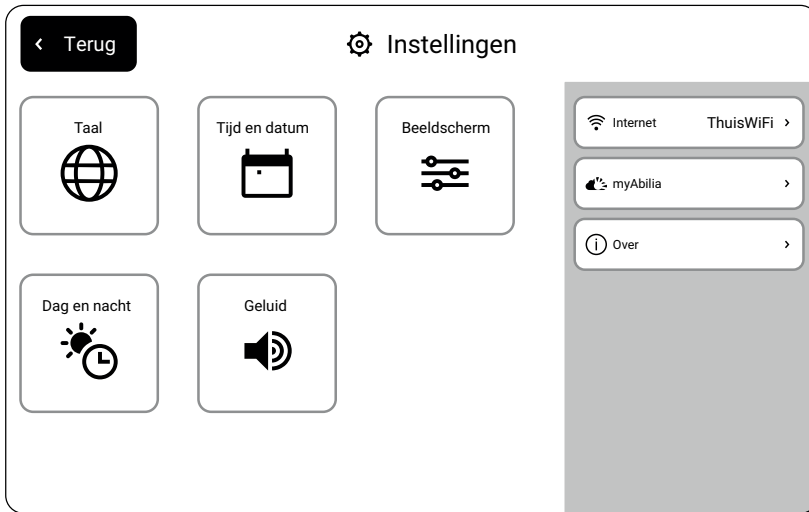


 **Taal**
Selecteer een taal. Talen gemarkeerd met  hebben spraakondersteuning.


 **Tijd en datum**
Stel de datum en tijd in.

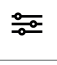 **Beeldscherm**
Zie *Scherminformatie kiezen* op pagina 10.


 **Dag en nacht**
Wijzig de dagintervallen, stel de helderheid van het beeldscherm in en schakel de donkere achtergrond in.


VOORBEELD: Stel de starttijd voor de ochtend in op uw gebruikelijke ontwaaktijd.

 **Geluid**
Pas de spraakondersteuning en het herinneringssignaal aan.



 **Internet** (optioneel)
Verbinding maken met internet om:


- automatisch de datum en tijd te krijgen.
- myAbilia te gebruiken.

 **myAbilia** (optioneel)
Werk de kalender op afstand bij; zie *Ondersteuning op afstand via myAbilia* op pagina 14.


 **Over**
Zie *Controleren op nieuwe programmaversies* op pagina 16.


Scherminformatie kiezen

Om te kiezen welke informatie er op het beeldscherm wordt weergegeven, gaat u naar het aan/uit-menu en tikt u op . Tik vervolgens op .

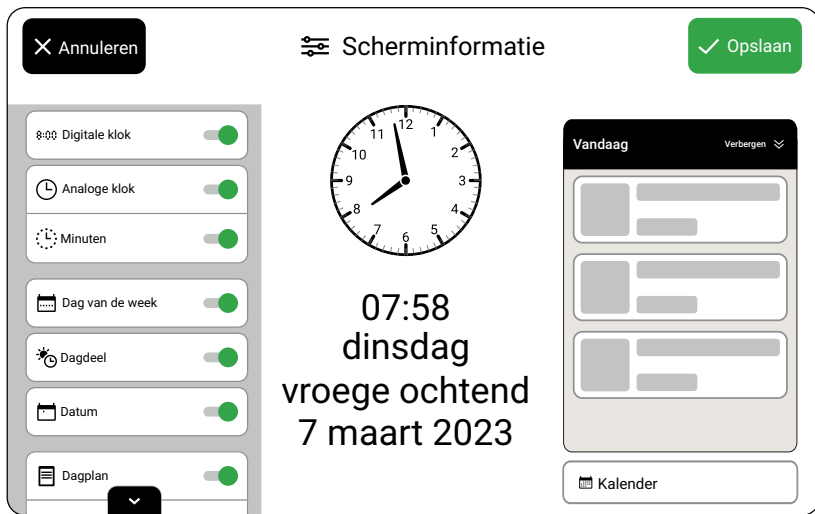

 **Digitale klok**
Toon of verberg de digitale klok.


 **Analoge klok**
Toon of verberg de analoge klok.

 **Minuten**
Toon of verberg de minuutmarkeringen.

 **Dag van de week**
Toon of verberg de dag van de week.

 **Dagdeel**
Toon of verberg het dagdeel, zoals ochtend of avond. De dagintervallen worden ingesteld in Dag en nacht; zie *De instellingen wijzigen* op pagina 9.

 **Datum**
Toon of verberg de datum.

 **Dagplan**
Toon of verberg het Dagplan met de activiteiten van vandaag.



Kalender

De knop Kalender tonen of verbergen; zie *De kalender beheren* op pagina 12.



Dagkleuren



Toon of verberg de dagkleuren in het Dagplan en de kalender.


TIP: Wanneer u de hoeveelheid informatie op het beeldscherm CARY Base vermindert, wordt het nog eenvoudiger en duidelijker.

De kalender beheren

⚠ WAARSCHUWING: Gebruik CARY Base niet als enige ondersteuning voor medicatie, medische behandeling of andere belangrijke activiteiten.

De Kalender-weergave bijwerken

Ga naar het aan/uit-menu om de kalender bij te werken. Tik op  en vervolgens op  of tik op de knop Kalender in de hoofdweergave (indien beschikbaar). Hier staan alle activiteiten in chronologische volgorde per dag. Activiteiten in het verleden worden in de lijst doorgestreept.

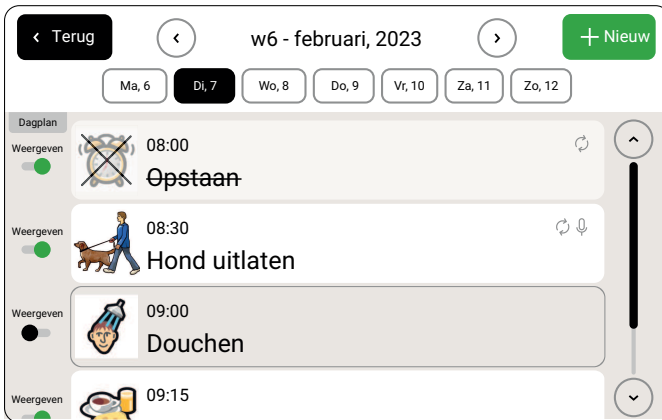

Dag selecteren

Tik op een dag om de activiteiten te bekijken.



Dagplan

Geeft aan of de activiteit wordt weergegeven in het dagplan.



Vorige week

Ga naar de vorige week.



Activiteit toevoegen

Zie *Een activiteit toevoegen* op de tegenoverliggende pagina. Zie *Een activiteit bewerken of verwijderen* op pagina 14 om een activiteit te wijzigen of te verwijderen.



Volgende week

Ga naar de volgende week.


TIP: Beperk het aantal activiteiten in het dagplan om activiteiten te markeren die voor de gebruiker van groot belang zijn.

Een activiteit toevoegen

Om een activiteit toe te voegen, gaat u naar Kalender; zie *Naar het aan/uit-menu gaan* op pagina 8.

Naam De naam die wordt weergegeven in het Dagplan. Houd het beschrijvend en kort.

Beschrijving Aanvullende informatie die in de herinnering wordt weergegeven.


 **Datum**
De datum van de activiteit.


 **Tijd**
Het tijdstip waarop de activiteit begint.

 **Terugkeerpatroon**
Of en hoe de activiteit wordt herhaald.

VOORBEELD: Het dagelijks uitlaten van de hond of één keer per jaar verjaardagen.

 **Weergeven in dagplan**
Als een activiteit wordt weergegeven in het dagplan van vandaag of alleen als herinnering.

 **Tekst afspelen bij alarm**
De naam en beschrijving worden hardop voorgelezen wanneer de herinnering begint.

 **Bericht opnemen**
Het bericht wordt afgespeeld wanneer de herinnering begint. Dit is niet mogelijk als Tekst afspelen is ingeschakeld.

 **Afbeelding toevoegen**
Kies een foto uit de bibliotheek om de activiteit te visualiseren. Zie *Ondersteuning op afstand via myAbilia* op pagina 14 om uw eigen afbeeldingen te gebruiken.

Een activiteit bewerken of verwijderen

Om een activiteit te bewerken of te verwijderen, gaat u naar Kalender; zie *Naar het aan/uit-menu gaan* op pagina 8. Tik op de activiteit die u wilt bewerken of verwijderen.

Annuleren **Wijzig activiteit** **Opslaan**

Afbeelding

Naam
Lunch

Beschrijving
Neem je PIN-pas mee.

Datum 07-03-2023 >

Tijd 11:45 >

Terugkeerpatroon Single >

Weergeven in dagplan

abc) Tekst afspelen bij alarm

Wijzigen

Verwijderen

Bericht opnemen 0:23 sec >

Wissen


 **Wijzigen**
Wijzig de huidige foto.



 **Wissen**
Verwijder de activiteit.

 **Verwijderen**
Verwijder de huidige foto.

Ondersteuning op afstand via myAbilia

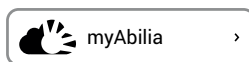Met myAbilia kunt u de kalender op afstand bijwerken en foto's toevoegen aan de fotobibliotheek.



Om de verbinding tussen CARY Base en myAbilia in te stellen, gaat u naar het aan/uit-menu, tikt u op  en vervolgens op . Volg de instructies op het beeldscherm.


Als u geen myAbilia-gebruikersaccount hebt, kunt u er een aanmaken op myabilia.com. Hiervoor hebt u een e-mailadres nodig.

Externe apparatuur aansluiten


De volgende externe apparatuur kan worden aangesloten op CARY Base:


- *Bedieningsschakelaar*

Gebruikt in plaats van op het scherm te tikken. Bijvoorbeeld om spraakondersteuning te krijgen of om herinneringen uit te schakelen.

Sluit de bedieningsschakelaar aan op de  aansluiting .

- *Apparatuur voor het doorsturen van een herinneringssignaal*

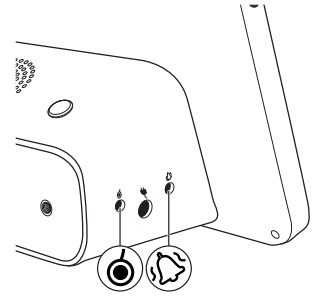

Bijvoorbeeld een trilsignaal of indicatielampje. Sluit de apparatuur aan op de relaisuitvoer .



Neem contact op met uw productdistributeur voor advies over externe apparatuur; zie www.abilia.com/en/abilias-world/distributors.



Onderhoud

Controleren op nieuwe programmaversies

1. Ga naar het aan/uit-menu.
2. Tik op .
3. Tik op .
4. Tik op Controleer op updates.
5. Als er een nieuwe versie is, drukt u op Update.

Herstel fabrieksinstellingen van CARY Base

Het kan nodig zijn CARY Base te herstellen wanneer u het product opknapt of wanneer u problemen oplost. Door het herstellen van de fabrieksinstellingen worden alle instellingen en persoonlijke gegevens verwijderd.

1. Ga naar het aan/uit-menu.
2. Tik op .
3. Tik op .
4. Tik op Herstellen naar fabrieksinstellingen.

Reinig CARY Base

Reinig CARY Base met een vochtige doek met milde zeep.

CARY Base kan met alcohol worden gereinigd.

Problemen oplossen


Als u ondersteuning nodig hebt bij CARY Base, raadpleeg dan *Contactgegevens* op de laatste pagina van deze gebruikershandleiding of ga naar www.abilia.com/intl/manuals.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Een ingestelde herinnering gaat niet uit.	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Zie de instructies in hoofdstuk <i>Start CARY Base</i> op pagina 6.
	Het herinneringsvolume is ingesteld op 0.	Verhoog het herinneringsvolume; zie <i>De instellingen wijzigen</i> op pagina 9.
De klok geeft de verkeerde tijd aan.	De klok is niet gesynchroniseerd.	Maak verbinding met het internet.
		Stel de tijd handmatig in; zie <i>De instellingen wijzigen</i> op pagina 9.
De helderheid van het beeldscherm is 's nachts te sterk.	De instelling Donkere achtergrond is niet ingeschakeld.	Schakel Donkere achtergrond in; zie <i>De instellingen wijzigen</i> op pagina 9.
Het scherm licht te vroeg op.	De dagintervallen zijn niet ingesteld als voorkeur.	Wijzig de dagintervallen; zie <i>Dagintervallen</i> op pagina 8.
Ik kan geen bericht voor een activiteit opnemen.	De instelling Tekst afspelen bij alarm is ingesteld op Aan.	Stel Tekst afspelen bij alarm in op Uit in de activiteit.
Ik kan niet controleren op updates.	CARY Base is niet aangesloten op het internet.	Maak verbinding met het internet; zie <i>De instellingen wijzigen</i> op pagina 9.
Het product werkt niet goed.		Schakel CARY Base uit en start opnieuw op; zie <i>Naar het aan/uit-menu gaan</i> op pagina 8.
		Herstel de fabrieksinstellingen; zie <i>Herstel fabrieksinstellingen van CARY Base</i> op pagina 16.
		Neem contact op met support.

Opslag en verwijderen

Houd het product binnenshuis op kamertemperatuur en uit de buurt van vocht.

OPMERKING: Schakel CARY Base uit voordat u de voedingskabel verwijdert.

Om CARY Base uit te schakelen, gaat u naar het aan/uit-menu en tikt u op .

CARY Base bewaart de instellingen ongeveer een jaar. Als CARY Base langere tijd wordt opgeslagen, moeten de instellingen opnieuw worden ingesteld.



Het product bevat elektrische componenten die moeten worden gerecycled. Breng het product naar een geschikte afvalverwerkingslocatie.

Productspecificaties

CARY Base

Afmetingen, H x B x D	137 x 207 x 74 mm
Gewicht:	520 g
Scherm	8 inch met resolutie van 1280 x 800
Stroomvoorziening	5V 2A
Stroomverbruik	Max. 10 W
Reservebatterij	1x CR2032 3V en 1x 2000mAh 3,7V
Luidspreker	Max. 82 dB op 1 meter afstand
Netwerk	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 / 5 GHz
Bluetooth®	Bluetooth v4.2
Besturingssysteem	Android 8.1
IP-klasse	IP31
Omgevingscondities voor gebruik	+5 °C – +35 °C. Maximaal 90% relatieve luchtvochtigheid
Aansluiting voor schakelaaringang	3,5 mm
Relaisuitvoer voor het doorsturen van het herinneringssignaal	3,5 mm
Geschatte levensduur	5 jaar

Accessoires

CARY Base heeft de volgende accessoires ter beschikking:

- Stroomadapter
- Externe schakelaars

Ga voor meer informatie over CARY Base en de accessoires naar www.abilia.com of scan de QR-code.



Scan mij!

Belangrijke informatie

Lees de inhoud van dit document zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

Veiligheidsdefinitie

⚠ WAARSCHUWING: Letsel- of overlijdensrisico als de instructies niet worden gevolgd.

⚠ VOORZICHTIG: Schaderisico van het product als de instructies niet worden gevolgd.

OPMERKING: Informatie die nodig is in een bepaalde situatie.

TIP: Aanvullende informatie om beter gebruik te kunnen maken van het product.

Veiligheidsinstructies voordat u CARY Base gebruikt

⚠ WAARSCHUWING: Lees deze waarschuwingen voordat u het product gebruikt.

- Gebruik alleen de voedingsadapter die bij CARY Base is geleverd.
- Gebruik CARY Base niet als enige ondersteuning voor medicatie, medische behandeling of andere belangrijke activiteiten.
- Gebruik CARY Base niet als het product beschadigd is.

Ernstige incidenten

Als zich een ernstig incident met het product voordoet, moet dit worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in uw land. Een incident wordt als ernstig beschouwd als het direct of indirect heeft geleid, zou kunnen hebben geleid of zou kunnen leiden tot overlijden van een patiënt, gebruiker of andere persoon, de tijdelijke of permanente ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere persoon of een ernstig gevaar voor de volksgezondheid.

Conformiteit met vereisten voor medische hulpmiddelen

CARY Base wordt op de markt gebracht als technisch hulpmiddel voor mensen met een beperking en voldoet aan alle benodigde vereisten, voorschriften en richtlijnen voor medische hulpmiddelen.

Productaansprakelijkheid

Het product is ontwikkeld en op risico's beoordeeld volgens ISO 14971. De handleiding en de technische specificaties zijn opgesteld volgens de veiligheidsbeoordelingen in de risicoanalyse. Houd altijd rekening met de veiligheid bij het gebruik van het product. Abilia AB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van onjuist gebruik of installatie van het product. Elke vorm van schade aan of misbruik maken van het product maakt de garantie ongeldig en vrijwaart de fabrikant van aansprakelijkheid. De geschatte levensduur van het product is geldig bij gebruik in overeenstemming met de beoogde gebruiks- en onderhoudsinstructies.

Contactgegevens

Zweden

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Zweden
Telefoon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Noorwegen

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Noorwegen
Telefoon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Verenigd Koninkrijk

Abilia UK Ltd, Unit 10 Buckingham Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Verenigd Koninkrijk
Telefoon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

Internationaal

www.abilia.com/intl/get-products/distributors

